

pLV-Golgi-mCherry

Golgi mCherry 标记慢病毒载体

货号: VL3511

载体性质:

原核培养抗性: Amp

真核抗性: Puromycin

功能: 表达 Golgi mCherry 标记蛋白

使用说明:


pLV-Golgi-mCherry 表达人 B4GALT1 基因 (GeneID: 2683) N 端 82 AA 信号肽和 mCherry 融合蛋白, 定位于细胞高尔基体, 用于 mCherry 标记细胞高尔基体。

pLV-Golgi-mCherry 采用慢病毒载体 pLV-Puro (VL3001) 构建, 表达嘌呤霉素抗性基因。与包装质粒 (KLV3500) 配合包装出慢病毒后可以感染目的细胞, 用嘌呤霉素筛选出 mCherry 标记高尔基体的稳定细胞株。

测序引物:

pEGFP-N-5': TGGGAGGTCTATATAAGCAGAG

PGK-R: GGAGGAGTAGAAGGTGGCG

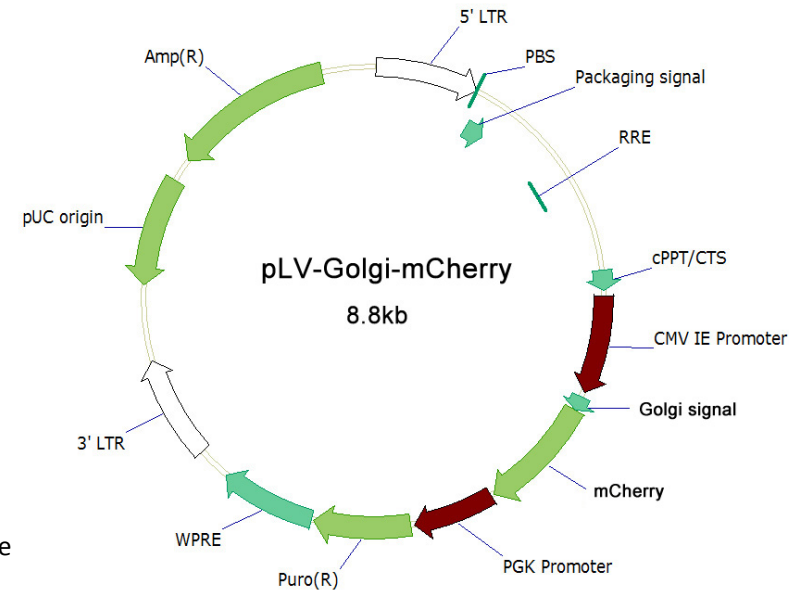

相关产品:

慢病毒包装载体

货号: KLV3500